


Logmar crowded test

Art: 9047290

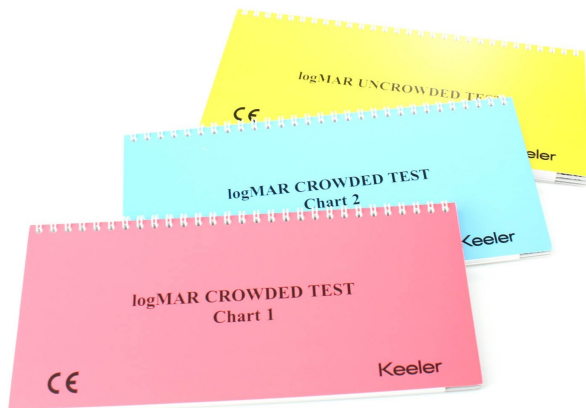

Productinformatie

Deze test is bestemd voor het testen van gezichtsscherpte bij kinderen vanaf 3 jaar oud.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Twee boekjes die gelijkwaardig zijn en afwisselend gebruikt kunnen worden zodat kinderen die zich in dezelfde ruimte bevinden de juiste volgorde niet uit het hoofd kunnen leren
- In de boekjes is om elke regel een kader gedrukt. Dit zorgt voor een gelijke interactie van de contouren voor elk optotype. Deze interactie stoort niet bij normale ogen, maar beïnvloedt wel de visus in geval van amblyopie. Dankzij deze kaders en het aanbieden van optotypen in lijn is deze test dus sensitiever voor het opsporen van amblyopie.
- 3m werkafstand
- 4 letters op elk scherptheitsniveau van 6/3 tot 6/38
- Gelamineerd en afwasbaar

INHOUD

- Twee boekjes (een rood en een blauw) met omkaderde optotypen: Crowded Test Chart 1 en 2
- Een gele boekje met niet-omkaderde, ver uit elkaar geplaatste optotypen: Uncrowded Test
- Een aanwij斯卡art voor het kind